

FIXEYE +



¡GRACIAS POR COMPRAR ESTE PRODUCTO!

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y guárdalo correctamente para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Funciones Principales

Fototerapia con luz LED Roja



El rango óptimo de luz roja LED a 660nm ayuda a estimular el colágeno y mejorar la oxigenación del tejido para una piel rejuvenecida y más firme.

Fototerapia con luz LED Azul



El rango óptimo de luz LED azul a 415 nm tiene propiedades antibacterianas y contribuye a atenuar las ojeras y la pigmentación irregular en la piel, ya que ayuda a inhibir la producción excesiva de melanina.

EMS (Estimulación Muscular Eléctrica)



Al integrar impulsos eléctricos suaves, se proporciona una apariencia más levantada y definida. Es especialmente efectivo para el cuidado de los párpados, asegurando una mirada más brillante y descansada.

Temporizador incorporado



Si no se realiza ninguna operación con el dispositivo durante 5 minutos, este se apagará automáticamente.

2

Calor Terapéutico



Este calor reconfortante no solo ayuda en la absorción de nutrientes esenciales, sino que también alivia el estrés y la fatiga ocular, contribuyendo a unos ojos más saludables y a una mirada más relajada.

Masaje Suave



Esta función mejora la circulación y ayuda a disminuir la hinchazón y las ojeras, proporcionando un aspecto más fresco. Es un paso esencial en cualquier rutina de cuidado de la piel, ofreciendo un momento de relajación.

Cabezal giratorio de 90°



Este dispositivo no solo maximiza la eficacia del tratamiento, sino que también ofrece la comodidad de ajustar la posición, asegurando una experiencia de tratamiento ergonómica y personalizada.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Carga magnética



Interruptor inteligente




Cabezal giratorio



Cambio de modo de tratamiento

3

EJEMPLO ILUSTRATIVO

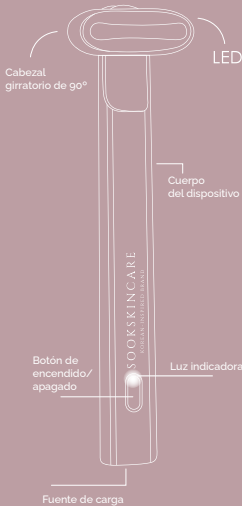

COMO UTILIZAR

1. Aplica una cantidad adecuada de sérum en la zona a tratar para mantener la piel hidratada.
2. Para encender, mantén pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante 3 segundos.

4

3. Desliza suavemente el cabezal de masaje, masajeando para estimular el contorno de los ojos y labios.
4. También puedes girar el cabezal de masaje.
5. Apaga: mantén pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante 3 segundos.
6. Después de usar, limpia el cabezal de masaje con un paño limpio, una toalla húmeda (o algodón con alcohol). ¡NO lo enjuagues con agua!
7. Después de encenderse, si no realizas ninguna operación, el dispositivo dejará de funcionar automáticamente después de 5 minutos y entrará en el estado de apagado. Si necesitas seguir utilizándolo, por favor, reinicialo.

MODO DE USO

Modo de luz roja (modo antienvejecimiento):
Cuando se activa este modo, la función EMS se encenderá al mismo tiempo, lo que causará una sensación de hormigueo en la piel. Debido a la diferencia en el valor de resistencia del cuerpo humano, algunas personas no sentirán la sensación de hormigueo de EMS, lo cual es un fenómeno normal.

Modo de luz azul:
Este modo no tiene función EMS.

Cambio de modo:
Durante el uso, puedes cambiar de modo según tus necesidades. El cambio de modo es posible con un simple botón.

5

CARGA

1. Inserta el extremo USB en el cabezal de carga USB de salida de 5V, alinea directamente el cabezal magnético en la fuente de carga de la parte inferior del aparato, y la carga magnética se llevará a cabo automáticamente.
2. Cuando la luz indicadora parpadea arriba y abajo, está en estado de carga.
3. Cuando la luz indicadora está encendida, la batería está completamente cargada.
4. Cuando la potencia sea inferior al 20%, la luz indicadora del botón se pondrá roja, indicando que debes cargar el dispositivo.
5. La luz indicadora parpadea lentamente 3x, lo cual es un recordatorio de una escasez extrema de energía y el dispositivo dejará de funcionar.
6. Carga el dispositivo en estado de funcionamiento, y el dispositivo se apagará automáticamente y entrará en estado de carga.
7. El cable de carga debe mantenerse en buen estado y no debe perderse.

ADVERTENCIAS

1. Este producto no es resistente al agua. No lo enjuague con agua y evite colocarlo cerca de la bañera, el lavabo o el lavamanos para evitar que caiga y se dañe.
2. La batería debe cargarse completamente al menos una vez cada tres meses; de lo contrario, la batería podría dañarse.

6

3. Cuando está en uso, el cabezal de masaje solo puede rotar hacia adelante (hacia la derecha), con una amplitud máxima de rotación de 90°. Después de usarlo, puedes regresarlo hacia la izquierda.

ASUNTOS A TENER EN CUENTA

1. Si sufres de alguna enfermedad de la piel, consulta primero con tu dermatólogo antes de usarlo.
 2. La primera vez, pruébalo en tu brazo.
 3. Si sientes alguna molestia, deja de usarlo de inmediato.
 4. Por razones de higiene, no compartas este producto con otras personas. Coloca el dispositivo fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- No uses productos químicos. Por favor, no desmontes este producto si no eres un profesional.

TÉRMINOS DE GARANTÍA

1. El período de validez del producto es de un año a partir de la fecha de compra.
2. El alcance de la garantía del producto se refiere a los problemas que surjan durante el uso normal del mismo.
3. Se ofrece mantenimiento gratuito dentro del período de garantía y dentro del alcance específico.

7

3. Para garantizar la limpieza y prevenir enfermedades infecciosas de la piel, una vez utilizado, este producto no será aceptado para devolución.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

MATERIAL DEL PRODUCTO	METAL + PLÁSTICO PC
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	350mAh
VOLTAGE	5V
TIEMPO DE CARGA	2H
TAMAÑO DEL PRODUCTO	150*13*11mm
PESO NETO	29g
POTENCIA NOMINAL	1.5W

IMPORTANTE

Los usuarios de los productos lo hacen bajo su propio riesgo.

No se asume responsabilidad alguna por lesiones físicas causadas directa o indirectamente por el uso de los productos.

Además, se reserva el derecho de modificar esta descripción y cambiar el contenido en cualquier momento sin la obligación de notificar a ninguna persona sobre tales modificaciones o cambios.

8

EXCEPCIÓN DE GARANTÍA

1. Bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, incluso durante el período de garantía, no se considerará garantía, pero se puede cobrar por la reparación:
 - 2. Daños causados por el incumplimiento en el uso, mantenimiento o conservación del producto según los requisitos del manual del producto;
 - 3. Daños causados por operación incorrecta, daño (como caídas, caídas en agua, etc.) y manipulación forzada;
 - 4. Fallas y daños no causados por el entorno de almacenamiento especificado para el producto (por ejemplo, demasiado alto, demasiado bajo, húmedo, etc.).
5. Esta garantía solo es aplicable en las ocasiones en las que los consumidores compran y usan el producto para consumo personal, no para uso comercial.

For more information, contact us by e-mail at:
costumerservice@sookskincare.com



© 2025 CUTISTECH GROUP S.L. All rights reserved. CUTISTECH GROUP S.L. owns trademarks, registered trademarks, patents, patents pending, design registrations, and protection of the copyright of SOOKSKINCARE products.
Compliant with regulations
www.sookskincare.com
Distributed by CUTISTECH GROUP S.L.
EU: Carrer Bruc 27, local 1, 08010, Barcelona, Spain
info@sookskincare.com

9

10