

ESPAÑOL

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTANDO TRIPOLLAR POSE VX	37
• DESCRIPCIÓN GENERAL	37
• TECNOLOGÍA	37
• CÓMO FUNCIONA	37
• KIT TRIPOLLAR POSE VX	38
USANDO TRIPOLLAR POSE VX	39
• CONOZCA EL DISPOSITIVO	39
• ANTES DE COMENZAR	41
• EMPIEZA A TRATAR TU PIEL	42
• DIRECTRICES DE TRATAMIENTO RECOMENDADAS	45
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	46
ATENCIÓN AL CLIENTE	46
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	47
APÉNDICE	48

Felicitaciones por su compra del electrodoméstico TriPollar Pose VX.

¡Estás en camino hacia una figura más suave y firme!
Este manual describe cómo utilizar el dispositivo TriPollar Pose VX.

Se puede encontrar información complementaria en: www.tripollar.com | cn.polloegen.com

AVISO IMPORTANTE: MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y PATENTES

© Pollogen Ltd. Todos los derechos reservados.

El diseño y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Fabricado por Pollogen Ltd.

Tecnología patentada.

Los nombres Pollogen, TriPollar son marcas comerciales registradas de Pollogen Ltd.

Todos los derechos de propiedad intelectual de esta publicación son propiedad de Pollogen Ltd. y están protegidos por las leyes de derechos de autor aplicables y las disposiciones de los tratados internacionales. Pollogen Ltd. se reserva todos los derechos no otorgados expresamente. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse de ninguna forma ni utilizarse para realizar trabajos derivados sin la aprobación previa por escrito de Pollogen Ltd.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Otros nombres de servicios y productos de marcas y empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

LA SEGURIDAD

Importante: asegúrese de leer todo el manual del usuario antes de usar el dispositivo. Respete siempre todas las advertencias, precauciones y precauciones de seguridad que se indican a continuación cuando utilice el dispositivo TriPollar Pose VX. Para obtener más información sobre la tecnología TriPollar, visite www.tripollar.com o cn.pollogen.com

ⓘ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

TriPollar Pose VX es un dispositivo eléctrico que debe usarse correctamente. Para reducir el riesgo de lesiones, cumpla con todas las advertencias y precauciones a continuación:

- No coloque ni almacene el dispositivo cerca del agua, como un fregadero o una bañera.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- No toque el dispositivo si se cae al agua. Desenchufe el dispositivo inmediatamente con las manos secas.
- Cuando esté enchufado, no deje el dispositivo desatendido.
- Antes de usar, asegúrese de que el sistema y su fuente de alimentación no presenten daños visibles. No lo utilice si el cable de alimentación está dañado o si el sistema está desmontado.
- Utilice el dispositivo únicamente con el cable eléctrico y la fuente de alimentación suministrados.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que sus manos estén completamente secas cuando opere el dispositivo.
- Apague el dispositivo y luego desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente después de usarlo o antes de limpiarlo.
- En caso de que el dispositivo no funcione correctamente, consulte con el servicio.
- Utilice el dispositivo solo para uso personal.
- Utilice el gel de preparación durante el tratamiento de acuerdo con sus instrucciones.

- No utilice el gel de preparación TriPollar después de su fecha de vencimiento.
- Importante:** No utilice TriPollar Pose VX en ninguna zona de la cara, el cuello, el área de la tiroides, los senos, la ingle, los genitales o la axila, ya que este dispositivo no está diseñado para tratar estas áreas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Utilice este dispositivo solo para el propósito para el que fue diseñado, como se describe en este manual. No seguir las instrucciones puede causarle daños o quemaduras en la piel.

- El uso de este producto puede causar molestias o efectos adversos en personas con constitución alérgica, personas con enfermedades de la piel y dermatitis alérgica, personas con piel sensible, etc. Si se producen efectos adversos durante el uso, debe dejar de utilizar este aparato inmediatamente.
- En caso de que sienta una constante sensación de sobrecalentamiento de la piel, detenga el tratamiento y consulte al servicio.

NO USE EL DISPOSITIVO SI SE APLICA ALGUNO DE LO SIGUIENTE:

- Eres menor de 18 años.
- Tiene marcapasos o desfibrilador interno.
- Tiene implantes de metal en el área tratada.
- Tiene cáncer o antecedentes de cáncer, especialmente cáncer de piel o lunares pre-malignos.
- Tiene afecciones concurrentes graves, como trastornos cardíacos.
- Eres embarazada o lactante, o en el abdomen durante la menstruación.
- Tiene una enfermedad autoinmune o un sistema inmunológico deteriorado debido a enfermedades inmunosupresoras como el SIDA, o está usando medicamentos inmunosupresores.
- Tiene una enfermedad que es estimulada por el calor, como herpes simple recurrente dentro del área tratada.
- Tiene alguna afección cutánea activa dentro del área tratada, como llagas, psoriasis, eccema o sarpullido.
- Tiene antecedentes de cicatrices queloides, cicatrización anormal de heridas o piel frágil.
- Cualquier procedimiento quirúrgico, invasivo y ablativo en el área de tratamiento antes de la curación completa.
- Tener lesiones sospechosas dentro del área tratada.
- Actualmente usa medicamentos, preparaciones a base de hierbas, vitaminas o complementos alimenticios que pueden causar pi el frágil o seca.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Los siguientes efectos secundarios son raros y generalmente temporales. Consulte a su médico si aparece alguna de las siguientes condiciones y dura más de 24 horas después del tratamiento:

- Dolor local
- Daño a la textura natural de la piel (formación de costras, ampollas, quemaduras, piel frágil, hematomas)

Si está considerando otros procedimientos estéticos en el área tratada, o tiene dudas sobre los posibles efectos secundarios, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.

PRESENTANDO TRIPOLLAR POSE VX

VISIÓN GENERAL

El uso previsto del dispositivo TriPollar Pose VX en el cuerpo es tensar la piel, mejorar el aspecto de la celulitis y reducir la circunferencia.

Con este dispositivo seguro, no invasivo y fácil de usar, tanto mujeres como hombres pueden disfrutar de tratamientos estéticos en casa, con resultados duraderos.

TECNOLOGÍA

TriPollar Pose VX combina dos tecnologías patentadas:

TriPollar Radio Frequency (RF) y Dynamic Muscle Activation (DMA), que funcionan de forma sinérgica y no invasiva para tensar la piel y mejorar su apariencia.

¿COMO FUNCIONA?

La energía de radiofrecuencia produce un calor que estimula la capa dérmica, contrayendo las fibras de colágeno y, a largo plazo, mejora la producción de colágeno, lo que resulta en un estiramiento y reafirmación de la piel.

Simultáneamente, el calor afecta a la hipodermis (capa de grasa), promoviendo la reducción de la circunferencia y mejorando temporalmente la apariencia de la celulitis.

El DMA contribuye a la microcirculación y el drenaje linfático temporales y a un efecto general de estiramiento y reafirmación.

El resultado es un aspecto más contorneado.

EL KIT TRIPOLLAR POSE VX

El kit contiene los siguientes componentes:

1. DISPOSITIVO TRIPOLLAR POSE VX (FIG.1)
2. FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CABLE DE ALIMENTACIÓN TRIPOLLAR POSE VX (FIG. 2)
3. EL GEL DE PREPARACIÓN (FIG.3) SE PUEDE UTILIZAR HASTA 12 MESES DESPUÉS DEL PRIMER USO.
Importante: Realice una prueba cutánea 24 horas antes del primer uso (consulte ANTES DE COMENZAR en la página 41).
4. MANUAL DEL USUARIO Y POLÍTICA DE GARANTÍA DE TRIPOLLAR POSE VX (FIG. 4)

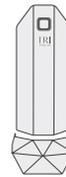


FIG.1

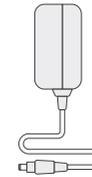


FIG.2



FIG.3



FIG.4

EL USO DE TRIPOLLAR POSE VX

CONOZCA SU DISPOSITIVO

El dispositivo TriPollar Pose VX enfoca la energía de RF (radiofrecuencia) en lo profundo de la dermis y la hipodermis, y utiliza tecnología DMA para apuntar a la capa muscular. (Figura 5).








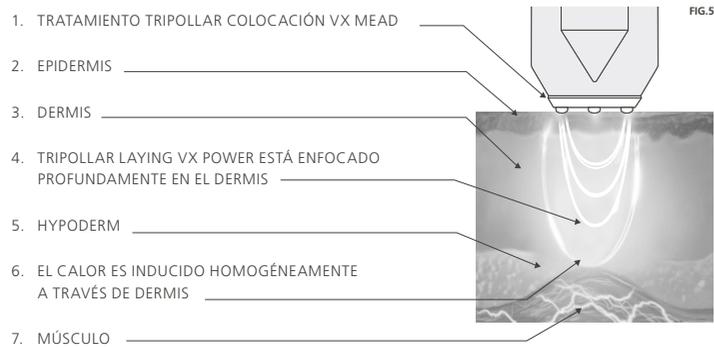


FIG.6 MUESTRA LOS COMPONENTES DEL APARATO TRIPOLLAR POSE VX:

1. EL CUERPO DEL APARATO
2. EL CABEZAL DE TRATAMIENTO
3. LOS ELECTRODOS
4. EL SENSOR DE TEMPERATURA
5. LA CONEXIÓN AL SUMINISTRO ELÉCTRICO
6. INDICADOR NARANJA
7. EL BOTÓN OIM / OFF
8. RF BAJA
9. RF PROMEDIO
10. ALTA RF
11. RF BAJA Y DMA BAJA
12. RF PROMEDIO Y DMA PROMEDIO
13. ALTA RF Y ALTA DMA
14. CUBIERTA PROTECTORA

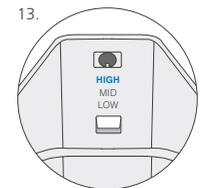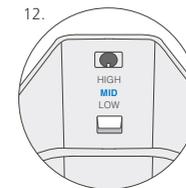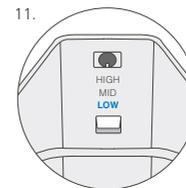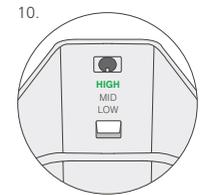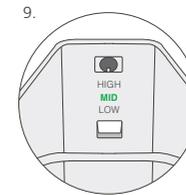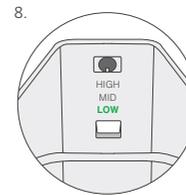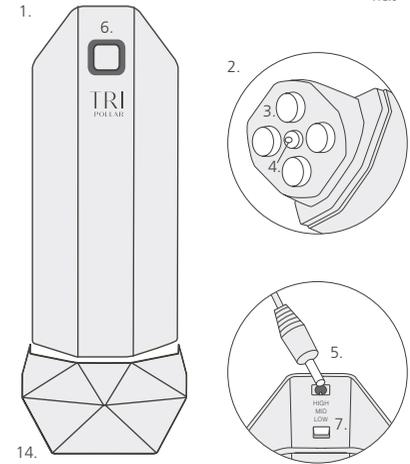

ANTES DE QUE EMPIECES

Antes de usar el dispositivo TriPollar Pose VX, haga lo siguiente:

1. Abra la caja que contiene el dispositivo, retire el dispositivo y la fuente de alimentación.
2. Conecte la fuente de alimentación al aparato (FIG.7).
3. Enchufe la fuente de alimentación en un tomacorriente (FIG.8).
4. Saque el gel de preparación de su caja.
5. Retire la cubierta protectora del dispositivo.

Importante: antes de usar el dispositivo por primera vez, realice una prueba cutánea 24 horas antes del uso: aplique una pequeña cantidad de gel de preparación en el interior del brazo y trate el área con el dispositivo TriPollar Pose VX. Asegúrese de que la piel no tenga una reacción negativa al gel o al tratamiento.

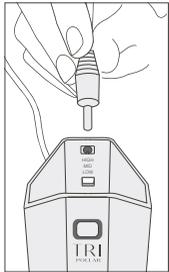


FIG.7

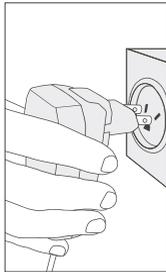


FIG.8

EMPIEZA A TRATAR TU PIEL

TriPollar Pose VX está destinado al tratamiento de las siguientes zonas: muslos, glúteos, abdomen, cintura, caderas y brazos (delante y detrás).

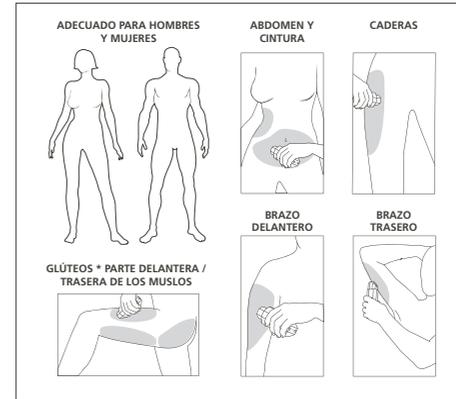


FIG.9

PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO

Trate su piel siguiendo los pasos a continuación:

1. Elija un área de tratamiento: muslo, glúteos, abdomen, cintura, cadera o brazo. No utilice este dispositivo en la cara, el cuello, las orejas, los senos, los genitales, el pecho o las axilas.
2. Limpiar y secar la zona tratada.
3. Aplique una capa fina y uniforme de gel de preparación en toda el área tratada (Tamaño de la soja). Puede sentir una sensación de calor.
4. Encienda la unidad presionando el botón de ENCENDIDO una vez (FIG. 10). La luz verde se iluminará en el nivel de potencia de RF BAJA.


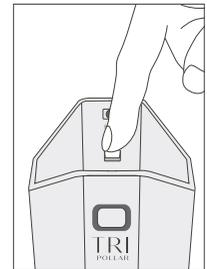


FIG.10

Consejos:

- Cada presión adicional del botón de encendido cambia el nivel de potencia de LOW RF, a MID RF, a HIGH RF, luego a LOW RF + DMA, MID RF + DMA y HIGH RF + DMA (FIG.10).
- Una pulsación larga durante 2-3 segundos apagará el dispositivo.
- El LED verde representa el modo RF, el LED azul representa el modo RF + DMA.

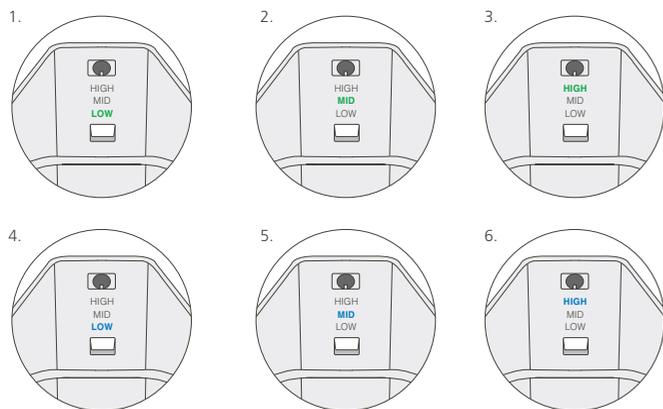

1. Bajo RF
2. Medio RF
3. Alto RF
4. Bajo RF + Bajo DMA
5. Medio RF + Medio DMA
6. Alto RF + Alto DMA

5. Seleccione el nivel de potencia que le resulte más cómodo. Puede elegir solo RF o RF + DMA. Importante: comience su primer tratamiento en el nivel BAJO y ajuste el nivel de potencia según su comodidad. Se recomienda utilizar ajustes de nivel más alto en las áreas de los muslos y glúteos, y ajustes de nivel más bajo para los brazos.
6. Divida el abdomen / glúteos / muslos en áreas de tratamiento de acuerdo con la tabla de la Figura 12. Trate la parte delantera, trasera del brazo o la cintura como un área de tratamiento.
7. Coloque el dispositivo en la zona tratada y comience a moverlo lenta (1cm/segundo) y constantemente sobre su piel en grandes movimientos circulares (12cmX12cm) o en forma de ocho (FIG.11). Los movimientos lentos calentarán el área interior, mientras que los movimientos rápidos no lograrán el mismo efecto. Como resultado, el área tratada comenzará a calentarse. Si elige el modo RF + DMA, sentirá una contracción muscular acompañada de un calentamiento interno de la zona tratada. Si experimenta un calor excesivo e intolerable, reduzca el nivel de potencia. La luz indicadora naranja se encenderá seguida de un "bip" cuando la piel alcance una temperatura óptima. Importante: Durante el tratamiento, los 4 electrodos deben permanecer en contacto con la piel en todo momento. No detenga el movimiento del dispositivo en ningún momento cuando toque su piel, ya que esto puede hacer que la piel se sobrecaliente y cause efectos secundarios no deseados.

Para un tratamiento óptimo, se recomienda que utilice primero el ajuste de potencia BAJA y siga las siguientes pautas:

- Si la luz ámbar aún no se enciende en 5 minutos o si no siente calor, intente mover el dispositivo lentamente sin detener el movimiento. Los movimientos circulares lentos y constantes son más efectivos que los movimientos rápidos. Cuanto más lento sea el movimiento, más rápido se calienta el área tratada.

- Si la luz ámbar aún no se enciende después de 3-5 minutos, seleccione un nivel de potencia más alto. Si las luces aún no se encienden después de aumentar un ajuste de potencia más alto, intente mover el dispositivo más lentamente, sin detener el movimiento.
- Si la luz naranja se enciende inmediatamente o si siente un calor excesivo, seleccione un nivel de potencia más bajo.

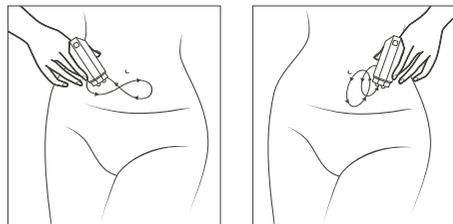


FIG.11

8. Una vez que se enciende la luz naranja seguida de un pitido, ha alcanzado la temperatura óptima. Continúe con el mismo movimiento circular lento durante unos momentos y luego amplíe gradualmente sus movimientos en el área tratada. Realice esta técnica cubriendo toda el área tratada, asegurándose de que la luz ámbar esté lo más iluminada posible durante el tratamiento. Cuando se mueve de un área tratada a otra, la luz ámbar puede apagarse si la temperatura de la piel no es lo suficientemente cálida. El sensor de temperatura automático del dispositivo protege la piel del sobrecalentamiento. Una vez que la piel ha alcanzado la temperatura máxima de tratamiento, la luz indicadora VERDE o AZUL se apagará, lo que indica que la fuente de alimentación se ha apagado automáticamente. El dispositivo se enciende automáticamente cuando la temperatura de la piel desciende por debajo de la temperatura máxima o cuando mueve el dispositivo a un área adyacente donde la temperatura de la piel es más baja.
9. Continúe trabajando sobre toda el área tratada en un movimiento circular lento durante 5 minutos. Asegúrese de mantener un calentamiento constante mientras cubre toda el área tratada.
10. Una vez que haya completado el tiempo de tratamiento de acuerdo con el área del cuerpo, puede pasar a la siguiente área de tratamiento repitiendo los pasos 5 a 9. **Importante:** después del tratamiento, puede ser visible enrojecimiento (eritema) y puede aparecer una ligera hinchazón de la piel (edema) en el área tratada. Ambos deberían desaparecer al poco tiempo.
11. Apague el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante dos segundos.
12. Desenchufe la fuente de alimentación del tomacorriente.
13. Retire suavemente el gel de preparación de su piel y enjuague el área. Puede aplicar crema hidratante.
14. Limpie los 4 electrodos con un paño húmedo o una toalla de papel y cubra el extremo del dispositivo con su cubierta protectora. **Advertencia:** no sumerja el dispositivo en agua.

DIRECTRICES DE TRATAMIENTO RECOMENDADAS

Normalmente, cada área tratada tarda 5 minutos (el área de tratamiento recomendada es de 12 x 12 cm). Sin embargo, los tiempos de tratamiento pueden variar de una persona a otra, según el tamaño corporal, el ritmo de tratamiento individual, etc. Además, puede optar por tratar áreas específicas de interés utilizando la misma técnica de trabajo.

Para obtener los mejores resultados, use el TriPollar Pose VX 2-3 veces por semana durante 6-8 semanas. Espere al menos 24 horas entre tratamientos en la misma zona tratada. Para obtener resultados a largo plazo, después de completar un tratamiento, se recomienda repetirlo de 2 a 4 veces al mes, o según sea necesario.

Para obtener los mejores resultados, divida el área tratada de acuerdo con la siguiente tabla:

Área tratada TriPollar Pose VX	Tratamiento recomendado
Abdomen	4-6 zonas
El muslo	2-3 zonas
Brazo (solo trasero o delantero)	1 zona
Nalga	2 zonas
Cadera	1-2 zonas
Cintura	1 zona

FIG.12

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su dispositivo TriPollar Pose VX no funciona, siga estos pasos antes de comunicarse con el centro de servicio o la tienda donde compró el dispositivo:

- Asegúrese de haber quitado la cubierta protectora del dispositivo.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado al dispositivo y que el adaptador de alimentación esté enchufado a la toma de corriente.
- Presione el botón de encendido y verifique que la luz verde se encienda.
- Asegúrese de haber aplicado el gel de preparación de acuerdo con las instrucciones de este manual. El dispositivo no funcionará correctamente sin la aplicación adecuada del gel de preparación.
- En caso de que la piel no se caliente, consulte con el servicio.
- En caso de que el LED verde / azul / naranja no funcione, consulte con el servicio.

SERVICIO AL CLIENTE

La satisfacción del cliente es nuestra primera prioridad. Para obtener servicio, consulte la tienda donde compró el dispositivo TriPollar Pose VX o visite www.tripollar.com | cn.pollogen.com. Cuando se comunique con su centro de servicio local o la tienda donde compró el dispositivo, tenga a mano el número de serie. El número de serie se puede encontrar en el panel superior del dispositivo. Para ayudarnos a brindarle el mejor soporte posible, envíenos sus comentarios y sugerencias. Los detalles de contacto se proporcionan en la contraportada de este manual, o puede contactarnos a través de nuestro sitio web (ver arriba).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este capítulo presenta las especificaciones del dispositivo TriPollar Pose VX.

TABLA 1

Especificaciones técnicas

Peso:	125gr ± 10% (sin soporte)
Dimensiones físicas:	H = 146 mm L = 50 mm L = 40 mm
Frecuencia RF de TriPollar:	1 MHz

TABLA 2

Condiciones de operación

Temperatura:	+ 5 ° C a + 30 ° C
Humedad:	20RH a 80RH
Entrada [AB]:	CA 100Vac a 240Vac 0.6 A 50 / 60Hz
Salida [AB]:	DC 12V 2.0A

TABLA 3

Transporte y almacenamiento

Temperatura:	0 ° C a 40 ° C
Humedad:	10RH a 90RH

TABLA 4

Seguridad eléctrica:	la fuente de alimentación de seguridad está clasificada como clase II con doble aislamiento
----------------------	---

APÉNDICE: DECLARACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Este apéndice proporciona la declaración de materiales peligrosos para el dispositivo TriPollar Pose VX.

Declaración de restricción de sustancias peligrosas (RoHS)

Nombre de la parte	Sustancia peligrosa					
	PB	HG	CD	CR ⁶⁺	PBB	PBDE
DIODE	X	•	•	•	•	•
MOSFET	X	•	•	•	•	•
UK AC PIN	X	•	•	•	•	•
EU AC PIN	X	•	•	•	•	•
TERMISTOR	X	•	•	•	•	•
OTRO	•	•	•	•	•	•

LEYENDA

- X Indica que la sustancia peligrosa en esta columna está contenida en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para este componente, y puede estar por encima del requisito límite de GB / T 26572. Los materiales restringidos se utilizan de acuerdo con las necesidades de fabricación. El uso de dichos materiales no tiene ningún impacto en la seguridad del dispositivo y no tiene efectos nocivos para los usuarios del dispositivo. **Esta declaración se incluye para recordarnos que el dispositivo debe desecharse de manera razonable y de acuerdo con la política ambiental de su país.**
- Indica que la sustancia peligrosa nombrada contenida en todos los materiales homogéneos para ese componente es menor que el requisito límite de GB / T 26572.